









# V-Drive

Elektrische hulp voor uw manuele rolstoel

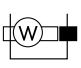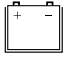

## Technische gegevens V-Drive

 zitbreedtes	 max. snelheid	 max. hoek	 autonomie	 vermogen motor	 batterij	 gewicht	 gebruikers gewicht
390 - 480	6 km/u	8°	ca. 15 km	150 W	2x12V/ 12Ah	11,8 kg (zonder batterij)	135 kg*
500 - 600 (H.D. versie)				200 W (H.D. versie)	2x12V/12Ah (H.D. versie)	8,2 kg (batterij)	200 kg* (H.D. versie)

Afmetingen in mm, gewicht in kg - Afwijkingen in maten en gewicht (1,5 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk. \* rolstoel inbegrepen

### Comfort

De V-Drive maakt verplaatsingen met een rolstoel heel eenvoudig. De begeleider laat de V-Drive al het werk doen. Het oprijden van heuvels, hellingen, oneffenheden... niets van al dit vormt een probleem voor de V-Drive. Een gebruiksvriendelijke snelheidsregeling zorgt ervoor dat u kan genieten van het verhoogde comfort waarmee de V-Drive toelaat iemand voort te bewegen.

Het gamma bestaat uit twee versies. Een Standaardversie (voor personen tot 135 kg) en een Heavy-Duty versie (voor personen tot 200 kg).



### Montage

Een eenvoudig te monteren bediening is beschikbaar voor zowel linkse als rechtse montage. Demontage voor transport in de wagen tijdens verplaatsingen wordt gedaan in een handomdraai. Loskoppelen van batterijen en aandrijfsysteem en u bent klaar.

Indien u de V-drive tijdens het wandelen niet wenst te gebruiken volstaat het de V-drive op te heffen via een lus rond een van duwhandvatten.



## N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1-15  
B-2920 Kalmthout  
België

Tel.: +32 (0) 3 620 20 20  
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

[www.vermeiren.be](http://www.vermeiren.be) - [info@vermeiren.be](mailto:info@vermeiren.be)



**VERMEIREN**  
Grensverleggend in mobiliteit

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

